



## ITO Sports Project

物理療法機器メーカーのパイオニアとして、アスリートの活躍を応援しています。



イトスポーツプロジェクト  <https://ito-sports-project.com/>



多くのスポーツ団体をサポートしています。

- アクセルトラッククラブ
- 茨城ロボッツ
- 宇都宮ブリッツェン
- NECレッドロケッツ
- F・マリノススポーツクラブ
- 鹿島アントラーズ
- シーホース三河
- 清水エスパルス
- 信州ブレイブウォリアーズ
- 新体操 日本代表チーム
- 公益財団法人 全日本空手道連盟
- 公益財団法人 全日本柔道連盟
- 公益財団法人 全日本スキー連盟
- 千葉ジェッツ
- 名古屋グランパス
- 新潟アルビレックスランニングクラブ
- 公益財団法人 日本アイスホッケー連盟
- 公益財団法人 日本ウエイトリフティング協会
- 一般社団法人 日本車いすテニス協会
- 一般社団法人 日本競輪選手会
- 一般社団法人 日本ゴールボール協会
- 公益財団法人 日本サッカー協会
- 公益財団法人 日本自転車競技連盟
- 公益財団法人 日本セーリング連盟
- 一般社団法人 日本デフバレーボール協会
- 一般社団法人 日本トップリーグ連携機構
- 公益財団法人 日本トライアスロン連合
- 一般社団法人 日本バイアスロン連盟
- 公益財団法人 日本パドミントン協会
- 一般社団法人 日本パラバドミントン連盟
- 一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟
- 公益財団法人 日本ハンドボール協会
- 公益財団法人 日本フェンシング協会
- 公益財団法人 日本ホッケー協会
- 公益財団法人 日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟
- 公益社団法人 日本ラクロス協会
- 公益財団法人 日本陸上競技連盟
- 公益社団法人 日本ローイング協会
- バレーボール 女子日本代表チーム
- H.C. 栃木日光アイスバックス
- 横浜ビー・コルセアーズ
- リガレ・仙台
- レバンガ北海道
- 一般社団法人 ロコソラーレ

(50首順)

発売元



### 伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8  
TEL. 048-254-1019 (お客様センター)  
<https://www.itolator.co.jp/>




お問い合わせ

注) このカタログに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。デザイン、仕様は改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

E0c001280-2412 B2412DL

本カタログの記載内容は、2024年12月現在のものです。

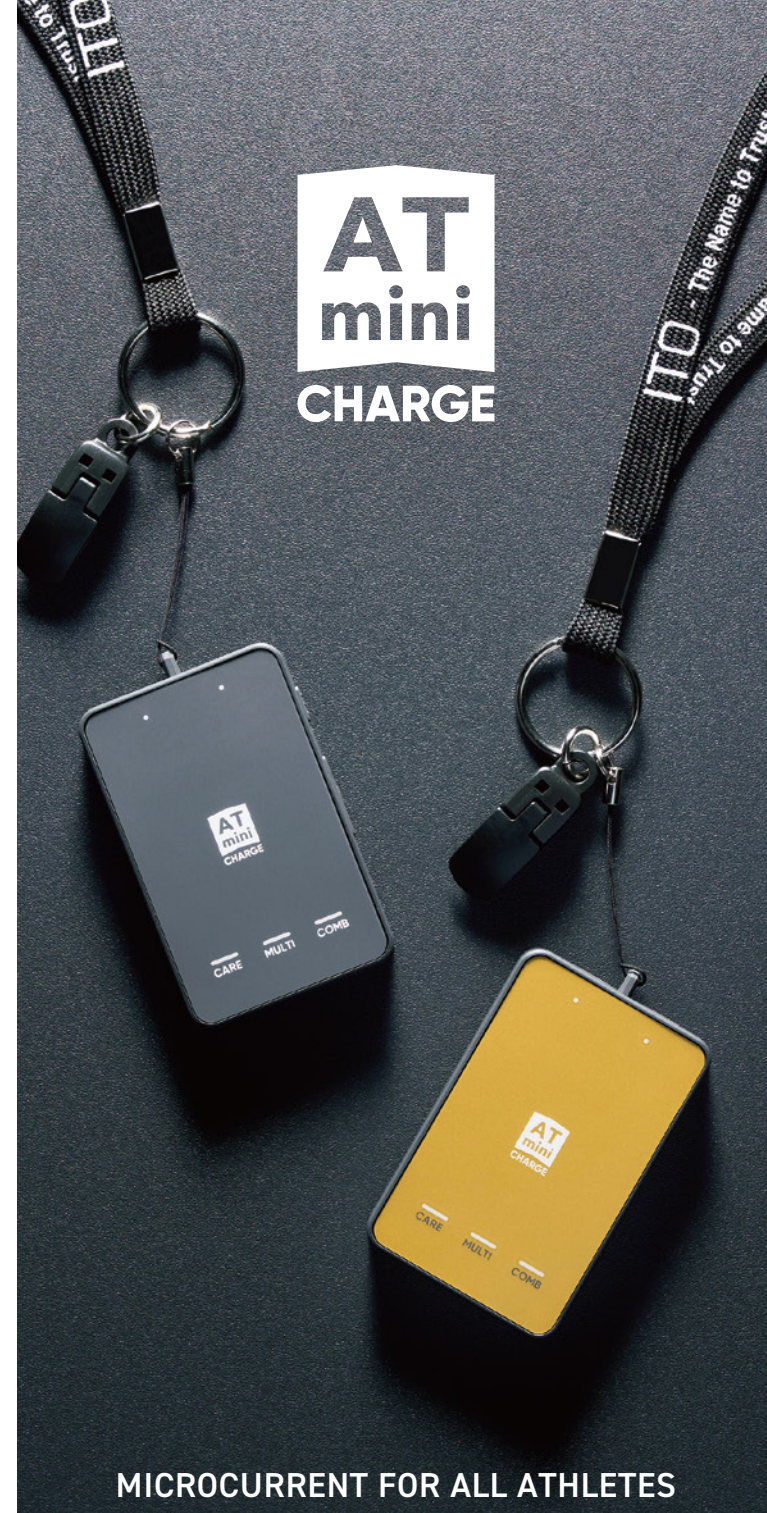

# AT mini CHARGE

## ATmini CHARGEで 明日を守る。

これまでのATminiに比べ、約26%小型化\*を実現。USB充電が可能になり、専用の充電器が不要になったことで、さらに使いやすく、持ち運びも便利になりました。新しく搭載された「MULTI」モードはアクティブだった身体をリセットでき、ストレッチとの相性も抜群です。日頃のコンディショニング・ケアからトレーニング後のトリートメントまで自宅ではもちろん、フィールドや移動中など場所を選ばず、いつでもセルフケアが行えます。

\*本体の容積比

MICROCURRENT FOR ALL ATHLETES






ダークグレー



イエローゴールド

## コンディショニング・ケアに最適な マイクロカレントを搭載

マイクロカレントは、ほとんど刺激を感じない微弱な電流です。もともと人体に存在している電流に似た、極めて弱い電流を流すことで、日頃のコンディショニング・ケアやトレーニング後のトリートメントに効果的です。

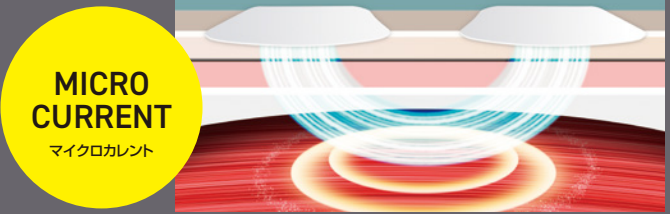

**MICRO CURRENT**  
マイクロカレント



2つの部位を同時にケアできる 2チャンネル出力タイプです。

## 目的に合わせて使用できる3種類のモード

<p><b>CARE</b> [ケアモード]</p>	<p><b>毎日のコンディショニング・ケア</b> お休みの時や移動中など日頃のコンディショニング・ケアにおすすめのモードです。</p> <p><b>タイマー</b> 12時間</p>
<p><b>MULTI</b> [マルチモード]</p>	<p><b>気になる部位を集中トリートメント</b> 短時間でのリフレッシュに最適なモードです。アクティブだった身体をリセットでき、ストレッチとの併用もおすすめです。</p> <p><b>タイマー</b> 3時間</p>
<p><b>COMB</b> [コンビモード]</p>	<p><b>大事なときのスペシャルケア</b> 短時間でのリフレッシュとケアのどちらにも適したモードです。パフォーマンスを発揮したい日の前日にもおすすめです。</p> <p><b>タイマー</b> 12時間</p>

## 本体を装着して使用が可能

別売りの専用ケースとバンドで本体を手首や足首に装着することで、日常生活の様々なシーンでコンディショニング・ケアが行えます。電極コードの取り回しもスマートになり、軽快な使用感を実現しました。



CHARGEケース(別売オプション品)とCHARGEバンド(別売オプション品)の装着例

## ヒーリングカレント導子と接続が可能

別売りのヒーリングカレント導子を接続して、マイクロカレントとアイシングの同時アプローチが可能です。筋肉や関節のトリートメント、クールダウンに効果を発揮します。



ヒーリングカレント導子  
(別売オプション品)



## スイッチひとつで簡単操作

「モードスイッチ」ひとつで操作が行えます。長押しで電源を入れ、使用したいモードを選択するだけで出力が開始されます。



## USB充電対応

USB(Type-C)充電が可能になり、専用の充電器が不要になったことで、さらに使いやすく、持ち運びも便利になりました。



ダークグレー

イエローゴールド

メーカー希望小売価格 **42,900円 (税抜 39,000円)**

## 【標準付属品】

- ① 充電コード(USB Type-C) ..... 880円(税抜 800円)
- ② イトーオリジナルパッド プレミアム(M・4枚) ..... 2,200円(税抜 2,000円)
- ③ R電極コード(1.3m・黒)(コードバンド付) ..... 3,300円(税抜 3,000円)
- ④ R電極コード(1.3m・灰)(コードバンド付) ..... 3,300円(税抜 3,000円)
- ⑤ ストラップ ..... 990円(税抜 900円)



## 【別売オプション品】

- ⑥ イトーオリジナルパッド プレミアム(L・4枚) ..... 2,640円(税抜 2,400円)
- ⑦ CHARGEケース ..... 2,200円(税抜 2,000円)
- ⑧ CHARGEバンド ..... 1,100円(税抜 1,000円)
- ⑨ ヒーリングカレント導子 ..... 27,500円(税抜 25,000円)



## 【本体仕様】

定格電源	DC3.7V/500mAh(リチウムイオン充電電池) DC5V(充電時)
定格消費電流	270mA/DC5V(充電時)
出力電流	実効値 最大190μA±20%
出力電圧	250mV±20%(ピーク電圧値、1kΩ負荷)
出力周波数	0.2Hz~400Hz(duty50%、プログラムごとに固定)
タイマー	3時間/12時間(プログラムごとに固定)
サイズ	(W)45×(D)13×(H)70.8(mm)
重量	約45g